

Sulfo-Cy3-E-dUTP (磺酸基-Cy3-乙基-dUTP)

产品介绍

Sulfo-Cy3-E-dUTP 由我司自主合成，为 FISH 探针的制备以及细胞凋亡检测试剂盒提供荧光染料。

应用范围

FISH 探针、TUNEL 检测

产品货号

CD0048

储运条件

-20℃避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性强：产品性能稳定，标记效果好；

批间差小：产品为公司自研，批间差控制的好。

产品组分

组分	CD0048
A. Sulfo-Cy3-E-dUTP (磺酸基-Cy3-乙基-dUTP)	25 nmole

产品参数

外观颜色：深红色粉末


Ex/Em：551/561 nm

分子式： $C_{43}H_{52}KN_5Na_3O_{21}P_3S_2$


分子量：1240.0

消光系数：162,000

分子结构图：

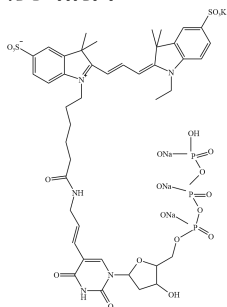

光谱图：

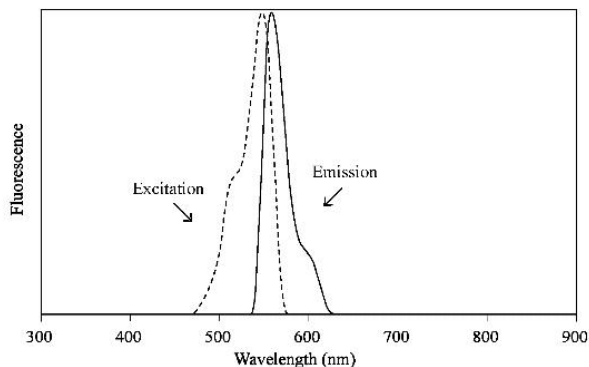

注意事项

1. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

一、储液制备

采用 pH7.4 的 10 mM Tris 溶解后，分装保存，避免反复冻融。

二、DNA 标记

(一) 试剂（自备）

1. Taq DNA 聚合酶
2. 10×Taq reaction buffer
3. 25 mM $MgCl_2$
4. dATP, dTTP, dCTP, dGTP（单独溶液）1 mM each
5. DNA 模板
6. 正向、反向引物，10 μ M each
7. PCR 清洁试剂盒

(二) PCR 反应

1. 先按照表 1 反应体系配制 PCR 反应混合液。
2. 再在每个反应管加 1 μ L 1mM YF[®]dye dUTP 染料。
注：阴性对照管，加 1 μ L 1mM dTTP 代替 YF[®]dye dUTP。
3. 按照表 2 程序运行 PCR 反应。
注：(1)热变性时间依据不同的 Taq 酶进行调整。
(2)退火温度设置： $T_m - 5^\circ C$ 。
(3)延伸时间根据扩增片段大小而定，一般 200~300 bp 片段设为 1 min 即可。
4. 可选步骤。用 PCR 清洁试剂盒去除未掺入的单核苷酸。

表 1 PCR 反应体系同系列产品

组分	体积	终浓度
10×Taq reaction buffer	2 μ L	1×
25 mM $MgCl_2$	2 μ L	5 mM
1 mM dATP	2 μ L	100 μ M
1 mM dCTP	2 μ L	100 μ M
1 mM dGTP	2 μ L	100 μ M
1 mM dTTP	1 μ L	50 μ M
10 μ M 正向引物	1 μ L	500 nM
10 μ M 反向引物	1 μ L	500 nM
模板	1 ng	50 pg/ μ L
Taq	1 U	0.05 U/ μ L
dH ₂ O	up to 19 μ L	

表 2 PCR 反应条件

温度	时间	循环
94℃	2 min	Hold
94℃	30 sec	30个循环
50~60℃	30 sec	
72℃	1 min	
72℃	5 min	Hold

(1)取 10%的 PCR 产物进行琼脂糖凝胶电泳（凝胶不加入 DNA 染料），检测 PCR 反应的效率和特异性，通过紫外凝胶成像仪或激光凝胶扫描仪观察。其中远红外染料（波长 $\geq$ 650 nm），肉眼无法观察。

注：凝胶染色前先观察 YF[®]染料的荧光，以免与下一步的凝胶染料发生荧光淬灭。

(2)采用后染法，使用 DNA 凝胶染料对凝胶进行染色，观察总的 PCR 产物或阴性对照组的 PCR 扩增产物。

三、TUNEL 法检测细胞凋亡

详情见 Tunal 法细胞凋亡说明书。

同系列产品

产品货号	产品名称	选购指南
YD0045	YF®488(6)-2-dUTP (YF®488(6)-2 标记 dUTP)	YF 系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好
YD0046	YF®555-dUTP (YF®555 标记 dUTP)	YF 系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好
YD0044	YF® 594-3-dUTP (YF®594-3 标记 dUTP)	YF 系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好
YD0043	YF®640-dUTP (YF®640 标记 dUTP)	YF 系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好
CD0048	Sulfo-Cy3-E-dUTP (磺酸基-Cy3-乙基-dUTP)	花菁类荧光染料
BD0050	Biotin-dUTP	生物素标记, 可做后续化学发光

相关联产品

产品货号	产品名称
YD0045	YF®488(6)-2-dUTP (YF®488(6)-2标记dUTP)
YD0046	YF®555-dUTP (YF®555标记dUTP)
YD0044	YF®594-3-dUTP (YF®594-3标记dUTP)
YD0043	YF®640-dUTP (YF®640标记dUTP)
CD0048	Sulfo-Cy3-E-dUTP (磺酸基-Cy3-乙基-dUTP)
T6013	YF®488 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (绿色, 通用型)
T6014	YF®594 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (红色, 通用型)
T6068	Biotin TUNEL细胞凋亡试剂盒
T6039	YF®555 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (橙红色, 通用型)
T6063	YF®640 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (远红, 通用型)
T6178	YF®488 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (绿色, 细胞样本)
T6179	YF®594 TUNEL细胞凋亡试剂盒 (红色, 细胞样本)